



BIOPLAN[®]

**PIEDE PIATTO
FLESSIBILE
SINTOMATICO**



CE 0426

 **BRM[®]**
Extremities

DESCRIZIONE PRODOTTO

Impianto endortesico per la correzione del piede piatto, mediante l'azione meccanica di riempimento della cavità tarsale che contrasta lo scivolamento dell'astragalo sul calcagno e ristabilisce la corretta conformazione della volta plantare. Realizzato in lega di titanio (Ti6Al4V) o in PEEK (Polietereeterchetone) con anima in lega di titanio per l'individuazione in radiografia. Disponibile in 7 taglie.

CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE

- Piede piatto rigido o con difformità associate
- Piede piatto con adduzione severa dell'avampiede
- Rotture croniche del tendine tibiale posteriore
- Artriti sintomatiche
- Evidente degenerazione articolare, come l'artrosi avanzata dell'articolazione subtalare
- Deformità di allineamento sovrastrutturali avanzata dell'articolazione subtalare
- Spasmo del muscolo peroneo
- Infezioni sospette o in corso

INDICAZIONI D'USO

- Piede piatto flessibile sintomatico del bambino e dell'adolescente
- In associazione a osteotomie di medializzazione del calcagno, in paziente con importante deformità in valgismo del retro-piede nel piede pronato adulto instabile
- Eccessiva lassità legamentosa
- Allergia del paziente nei confronti dei materiali dell'impianto
- Strutture ossee insufficienti a garantire una buona tenuta dell'impianto
- Tumori ossei locali
- Peso superiore a quello indicato dal fabbricante
- Gravi patologie sistemiche o dismetabolismi con coinvolgimento dell'area anatomica interessata



Per ulteriori informazioni e per scaricare i documenti

IMPIANTI

	TITANIO	Ø	L
	BRSBIOP0713V	7.0	13
	BRSBIOP0814V	8.0	14
	BRSBIOP0915V	9.0	15
	BRSBIOP1016V	10.0	16
	BRSBIOP1117V	11.0	17
	BRSBIOP1218V	12.0	18
	BRSBIOP1319V	13,0	19

	PEEK	Ø	L
	BRSBIOP0713P	7,0	13
	BRSBIOP0814P	8,0	14
	BRSBIOP0915P	9,0	15
	BRSBIOP1016P	10,0	16
	BRSBIOP1117P	11,0	17
	BRSBIOP1218P	12,0	18
	BRSBIOP1319P	13,0	19

STRUMENTARIO

UAOI0MA000 Manico innesto rapido

UAOI0SA00S Manico a innesto rapido AO in silicone

UAOI0SAC0S Manico a innesto rapido AO in silicone con cricchetto

SBPI1CI001 Cacciavite inseritore

SBPI1CE002 Cacciavite estrattore

SBPI10S001 Sonda

SBPI1SF001 Spingi filo

SBPI10P007 Prova taglia 7

SBPI10P008 Prova taglia 8

SBPI10P009 Prova taglia 9

SBPI10P010 Prova taglia 10

SBPI10P011 Prova taglia 11


SBPI10P012 Prova taglia 12

SBPI10P013 Prova taglia 13

SBPI1PG001 Pin guida Ø 2 mm

SBPI000000B Box BioPlan

KIT BIOPLAN

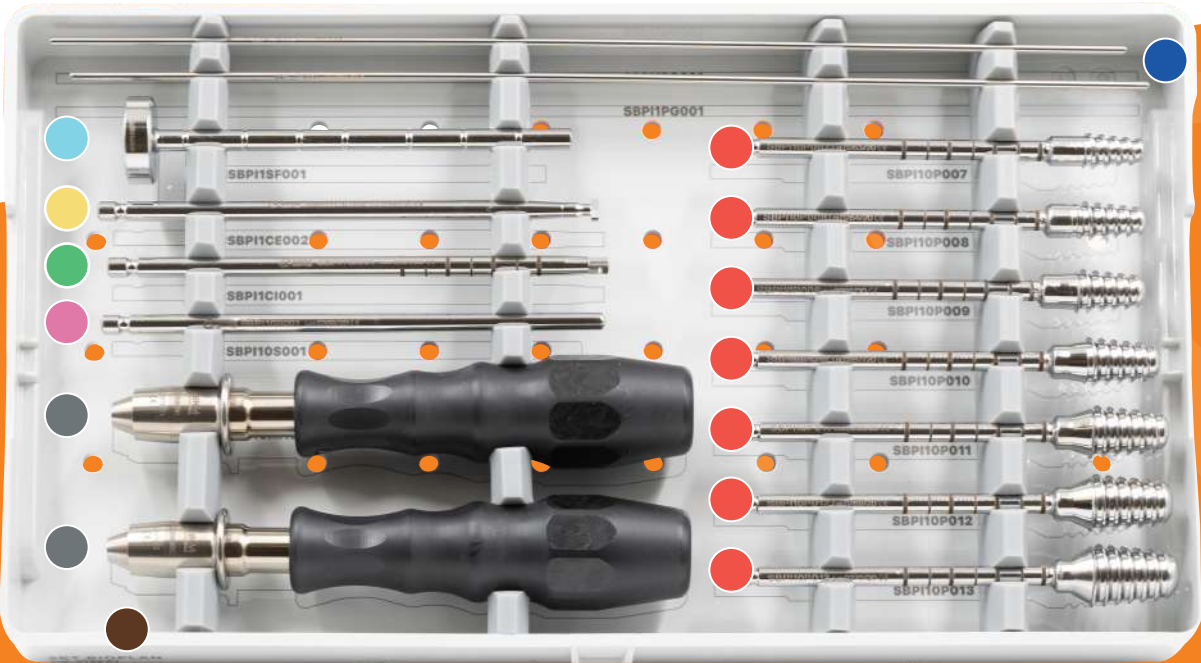

Distribuito da:



BRM EXTREMITIES Srl

Via Lorenzo Mascheroni 29
20145 Milano (MI) Italy
T +39 02 89415508
brm-extremities.com

Sede operativa

Via Privata ai Campi 7
23862 Civate (LC) Italy
T +39 0341 1693087
info@brm-extremities.com

D-03A-001-A-IT-REV00